



Ομάδα προϊόντων

WD - Φορητά παραπετάσματα προστασίας από τις ακτίνες Χ



Προϊόντα

WD204	WD204-(-0507-0517), WD204-(2007-2017)
WD254	WD2541B, WD2542B, WD254-99
WD255	WD2551A, WD2551B, WD2552A, WD2552B, WD255-99
WD257	WD2571, WD25720, WD25721, WD25722, WD257-99
WD258	WD258-99
WD260	WD260/100/81/E, WD260-99
WD261	WD26105, WD26105-S
WD300	WD300, WD300-99
WD302	WD3021, WD302-99
WD304	WD3041, WD304-99
WD306	WD306/0,5/1000, WD306/0,5/1300, WD306/1,0/1000, WD306/1,0/1300
WD310	
WD504	WD504-(0507-0517), WD504-(2007-2017)
WD-99	

www.mavig.com/eifu

DE	Vielen Dank, dass Sie sich für MAVIG entschieden haben. Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter dem Link der Überschrift.	LT	Ačiū, kad įsigijote MAVIG produktą. Naudojimo sąlygų ir instrukcijų rasite pavadinimo esančią uorodą.
EN	Thank you for buying MAVIG products. The instruction for use can be found under the link in the headline.	LV	Paldies, ka iegādājāties MAVIG produktus. Lietošanas instrukciju meklējiet virsrakstā iekļ autajā saitē.
BG	Благодарим Виза закупените продукта на MAVIG. Ръководството за употреба може да изтеглите от линк в заглавието.	NL	Hartelijk dank voor het kopen van MAVIG-producten. De gebruiksaanwijzing vindt u via de link in de kop.
CS	Děkujeme vám za zakoupení výrobků MAVIG. Návod k použití naleznete prostřednictvím odkazu v nadpisu.	NO	Takk for at du har valgt MAVIG-produkter. Instruksjonene for bruk er tilgjengelige under lenken i overskriften.
DA	Tak fordi, du har købt MAVIG-produkter. Instruktion til brug kan findes under linket i overskriften.	PL	Dziękujemy za zakup produktów MAVIG. Instrukcję dotyczącą obsługi znajdziesz w linku w nagłówku.
ET	Täname, et soetasite ettevõtte MAVIG toote. Kasutusjuhised leiате pealkirjasolevalt lingilt.	PT	Obrigado por comprar produtos da MAVIG. As instruções de utilização estão disponíveis na ligação que se encontra no título.
ES	Le damos las gracias por comprar productos de MAVIG. Las instrucciones pueden encontrarse en el enlace en el titular.	RO	Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor MAVIG. Instrucțiunile de utilizare se găsesc în link-ul din titlu.
FI	Kiitos, että ostit MAVIG-tuotteita. Käyttöohjelöytyvät otsikon linkistä.	SV	Tack för att du köper MAVIG-produkter. Bruksanvisningen finns under länken i rubriken.
FR	Merci d'avoir acheté des produits MAVIG. Vous trouverez le mode d'emploi sous le lien dans le titre.	SK	Ďakujeme vám, že si kupujete výrobky spoločnosti MAVIG. Návod na použitie nájdete na odkaze v záhlaví.
EL	Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα Προϊόντα της MAVIG. Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στον τίτλο.		
HU	Köszönjük, hogy MAVIG termékét vásárolt. A használati útmutató a fejlécbenszereplő hivatkozáson keresztül érhető el.		
IT	Grazie per aver acquistato prodotti MAVIG. Le istruzioni per l'uso possono essere consultate al link sul titolo.		



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της MAVIG. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις που αφορούν την ασφάλεια.

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει, ως εκ τούτου, να φυλάσσονται σε σημείο κοντά σε αυτό, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέξετε σε σημαντικές πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση.

Μην δίνετε το προϊόν σε τρίτους χωρίς έγκυρες οδηγίες χρήσης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, τα στοιχεία επικοινωνίας για το τοπικό γραφείο MAVIG παρέχονται στο τέλος του παρόντος οδηγού.

Αποποίηση ευθύνης

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα προϊόντα που περιγράφονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης.

Η MAVIG παρέχει εγγύηση μόνο για το παρόν εγχειρίδιο και τα προϊόντα στο πλαίσιο της ευθύνης του κατασκευαστή.

Η MAVIG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυθαίρετες τροποποιήσεις του προϊόντος, ή χρήση του προϊόντος για σκοπούς που δεν προβλέπονται. Η MAVIG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε κακή χρήση, ή τροποποιήσεων. Επειδή οι μη προβλεπόμενες τροποποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία, την ασφάλεια ή την αξιοπιστία του προϊόντος, για τις τροποποιήσεις του προϊόντος απαιτείται γραπτή έγκριση από τη MAVIG.

Αλλαγές

Τα προϊόντα της MAVIG υπόκεινται σε συνεχή εξέλιξη. Η MAVIG διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις οδηγίες, τη συσκευασία, τον εξοπλισμό ή τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντικείμενο της παράδοσης χωρίς προειδοποίηση.

Μεταφράσεις

Το πρωτότυπο έγγραφο είναι στα γερμανικά. Σε περίπτωση μετάφρασης, η γερμανική έκδοση παραμένει η έγκυρη έκδοση.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η MAVIG είναι σήμα κατατεθέν. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1.	Γενικές πληροφορίες	5
1.1.	Κατασκευαστής	5
1.2.	Λειτουργία και προσωπικό χειρισμού	5
1.3.	Σύμβολα, οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις	5
1.4.	Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745	5
2.	Πληροφορίες για το προϊόν	6
2.1.	Περιγραφή προϊόντος	6
2.2.	Σκοπός	6
2.3.	Αντενδείξεις και αποκλεισμοί	6
2.4.	Ταυτοποίηση	6
2.5.	Σήμανση CE	6
2.6.	Αξεσουάρ και ανταλλακτικά	6
3.	Εγκατάσταση και χρήση	7
3.1.	Περιβάλλον χρήστη	7
3.2.	Εγκατάσταση, μέθοδοι σύνδεσης, συνδέσεις	7
3.3.	Καθαρισμός, απολύμανση, αποστείρωση	7
3.3.1.	Καθαρισμός	7
3.3.2.	Απολύμανση	8
3.4.	Συντήρηση και επισκευή	9
3.5.	Βαθμονόμηση και επαλήθευση	9
3.6.	Εγγύηση	9
4.	Αποθήκευση, μεταφορά, διάρκεια ζωής	10
5.	Τεχνικά στοιχεία	10
6.	Απόσυρση και διάθεση	10

1. Γενικές σημειώσεις

1.1. Κατασκευαστής

MAVIG GmbH
Stahlgruberring 5
81829 Μόναχο
Γερμανία

Τηλέφωνο
Φαξ

+49 (0) 89 420 96 - 0
+49 (0) 89 420 96 - 200

eMail
Ιστοσελίδα

info@mavig.com
www.mavig.com

1.2. Λειτουργία και προσωπικό χειρισμού

Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (με ιατρική και ακτινολογική εξειδίκευση σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας).

Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν μόνο μετά την ορθή εκτέλεση της πρώτης θέσης σε λειτουργία.

Πριν από την πρώτη χρήση, όλα τα μέρη του προϊόντος πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά.


1.3. Σύμβολα, οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια είναι υποχρεωτικές και πρέπει να τηρούνται. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί **τραυματισμός** ή **θάνατος** ενός ή περισσότερων προσώπων. Πριν από τη λειτουργία του συστήματος πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτές τις σημειώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να τηρούνται οι προειδοποιητικές σημειώσεις, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί **ζημιά στη συσκευή ή δυσλειτουργία**. Πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία του συστήματος.

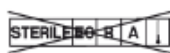

Δεν αποστειρώνεται

Το προϊόν δεν πρέπει να αποστειρώνεται με οξείδιο του αιθυλενίου ή με ακτινοβολία, τεχνικές ασηπτικής επεξεργασίας, ατμό ή ξηρή θερμότητα.

1.4. Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745

Σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς, τα σοβαρά περιστατικά που συνέβησαν σε σχέση με ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν της MAVIG πρέπει να αναφέρονται στη MAVIG και στις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται ο χρήστης. Υπό αυτή την έννοια, τα περιστατικά αναφέρονται στο εάν η χρήση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος οδήγησε, θα μπορούσε να οδηγήσει ή θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα στο θάνατο ή σε προσωρινή ή μόνιμη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς, ενός χρήστη ή άλλου προσώπου.

2. Πληροφορίες προϊόντος

2.1. περιγραφή του προϊόντος

Ενημερωθείτε για τις παραλλαγές των προϊόντων και τα τεχνικά στοιχεία απόδοσης στα δελτία δεδομένων και τους καταλόγους προϊόντων μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.mavig.com.

2.2. Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

Τα φορητά παραπετάσματα προστασίας από τις ακτίνες X χρησιμοποιούνται για την εν κινήσει προστασία του ιατρικού προσωπικού από την ιονίζουσα ακτινοβολία. Τα προϊόντα αυτά έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές σε κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, όπως κλινικές, νοσοκομεία και ιατρεία. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας, όπως γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

2.3. Αντενδείξεις και αποκλεισμοί

Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται θεωρείται ακατάλληλη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από αυτό.

2.4. Ταυτοποίηση

Το προϊόν μπορεί να αναγνωρίζεται σαφώς από την πινακίδα τύπου/την ετικέτα προϊόντος που είναι προσαρτημένη στο προϊόν. Σε αυτό θα βρείτε τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ονομασία του προϊόντος, Κατασκευαστή και διεύθυνση, Σειριακό αριθμό

2.5. Σήμανση CE



Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2017/745 (MDR) της ΕΕ για τις ιατρικές συσκευές. Η συμμόρφωση του προϊόντος στο πρότυπο CEυποδεικνύεται από το σύμβολο CE στην πινακίδα τύπου.

2.6. Αξεσουάρ και ανταλλακτικά

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ανταλλακτικά και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ακυρώνει κάθε ευθύνη και υποχρέωση εγγύησης του κατασκευαστή. Ο χειριστής υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο με τα εγκεκριμένα ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ενέχει άγνωστους κινδύνους και πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ανταλλακτικά και αξεσουάρ, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.mavig.com ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: EMailinfo@mavig.comoder στο τηλέφωνο +49 (0) 89 420 96 - 0.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η χρήση ανταλλακτικών τρίτων μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του προϊόντος και να οδηγήσει σε βλάβη, δυσλειτουργία ή ολική αποτυχία. Συνεπώς, να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά!

3. Εγκατάσταση και χρήση

3.1. Περιβάλλον χρήσης

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος, η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου πρέπει να παραμένουν εντός του εύρους των κανονικών συνθηκών λειτουργίας.

3.2. Εγκατάσταση, μέθοδοι σύνδεσης, συνδέσεις

Το προϊόν MAVIG πρέπει να εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν το προϊόν/σύστημα. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το προϊόν/σύστημα να καταστεί ασταθές ή/και να μην επιτελέσει τη λειτουργία του.

Διατίθενται οδηγίες εγκατάστασης για τους ακόλουθους τύπους:

WD261, WD257, WD302, WD304: Έγγραφο WDX010xx

Για όλες τις άλλες παραλλαγές, δεν απαιτούνται οδηγίες εγκατάστασης.

3.3 Καθαρισμός, απολύμανση, αποστείρωση

3.3.1. Καθαρισμός

Για το σκούπισμα όλων των επιφανειών:

- Χρησιμοποιήστε μαλακά πανιά χωρίς σωματίδια που δεν έχουν υπολείμματα από άλλες μεθόδους καθαρισμού.
- Βρέξτε το πανί μόνο ελαφρώς. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή υγρό πλύσης του εμπορίου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται υγρό στη συσκευή κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
- Στη συνέχεια τρίψτε τις επεξεργασμένες επιφάνειες με ένα στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Βλάβη στο προϊόν

Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά, λειαντικά, διαβρωτικά, λευκαντικά, αλκαλικά, όξινα ή διαβρωτικά μέσα καθαρισμού ή στίλβωσης (π.χ.: διαλυτικά, ασετόν, λειαντικά, χλώριο κ.λπ.).

Ισχύει μόνο για το WD261:

Καθαρισμός κουρτινών ComforTex® HPMF

Οι ακόλουθες σημάνσεις ισχύουν για την ασπίδα ακτινοβολίας:

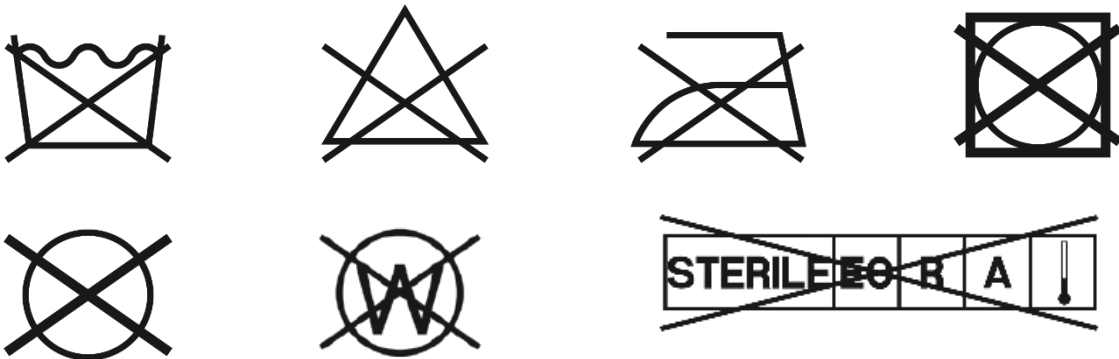

Οι πρόσφατοι ρύποι μπορούν γενικά να σκουπιστούν με ένα διάλυμα ξεπλύματος σε θερμοκρασία περίπου 20°C και ένα μαλακό πανί. Για επίμονους ρύπους συνιστούμε τη χρήση ενυδατικού διαλύματος θειοθειικού νατρίου 10%.

Για υγρά που περιέχουν πρωτεΐνες (όπως αίμα), χρησιμοποιήστε κρύο νερό για τον καθαρισμό. Βεβαιωθείτε ότι το πανί είναι υγρό και όχι βρεγμένο.

3.3.2. Απολύμανση

Χρησιμοποιήστε μόνο πανάκια σκουπίσματος για απολύμανση.

- Δεν πρέπει να διεισδύουν υγρά στη συσκευή.
- Η χρησιμοποιούμενη διαδικασία επανεπεξεργασίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές.
- Οι διαδικασίες και οι συνθήκες υγιεινής αποτελούν ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης και πρέπει να καθορίζονται από τον ίδιο.
- Εξασφαλίστε τη συμβατότητα των υλικών (π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, πλαστικό, μολύβδινο ακρυλικό, μολύβδινο γυαλί, PVC, φυσικό, σιλικονούχο ή συνθετικό καουτσούκ, επιχρωμωμένες, βαμμένες ή επικαλυμμένες επιφάνειες).
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε την καταλληλότητα του προϊόντος σε ένα κρυφό σημείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ	Επιφανειακή ζημιά Η ανάμειξη διαφορετικών απολυμαντικών και/ή η ανάμειξη απολυμαντικών με απορρυπαντικά μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος και/ή να βλάψει τις επιφάνειες του προϊόντος.
----------------	--

Ισχύει μόνο για το WD261: Απολύμανση κουρτινών ComforTex® HPMF
Πριν από την απολύμανση πρέπει πάντα να προηγείται καθαρισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ	Βλάβη στο προϊόν Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά με βάση δραστικά συστατικά αλκοόλες, καθαρές αλκοόλες (π.χ. αιθανόλη, ισοπροπανόλη) και οξειδωτικά απολυμαντικά καθώς και απολυμαντικά που περιέχουν αλάτι και χλώριο, τα οποία προσβάλλουν την επιφάνεια των υλικών κάλυψης περισσότερο από τα απολυμαντικά με βάση άλλες χημικές ουσίες.
----------------	---

Η απολύμανση με στεγνά μαντηλάκια πρέπει να πραγματοποιείται με χαμηλή μηχανική πίεση. Για τη διατήρηση των ιδιοτήτων των προϊόντων μας, συνιστούμε τη χρήση των ακόλουθων απολυμαντικών. Παρακαλείστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- Οι δοκιμές που πραγματοποιούμε δεν αντιστοιχούν σε πιστοποιημένες ή τυποποιημένες διαδικασίες δοκιμών, με αποτέλεσμα να μη μπορούμε να δώσουμε καμία έγκριση, αλλά να κάνουμε μόνο συστάσεις.
- Καθώς δεν έχουμε καμία επιρροή στην παραγωγή και στις πρώτες ύλες για την παραγωγή απολυμαντικών, απορρίπτουμε οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με την "αντοχή στα απολυμαντικά".
- Η αποτελεσματικότητα του απολυμαντικού επιφανειών δε λήφθηκε υπόψη. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του απολυμαντικού.
- Η MAVIG αποκλείει οποιαδήποτε εγγύηση ή ευθύνη για επακόλουθες ζημιές για τους παραπάνω λόγους.

Απολυμαντικό	Κατασκευαστής	Βάση κρούσης
Microbac forte	BODE Chemie GmbH	Τεταρτοταγείς ενώσεις, παράγωγα αλκυλαμίνης
Kohrsolin FF	BODE Chemie GmbH	Αλδεΐδη, τεταρτοταγείς ενώσεις
Αντικειμενικό FF	Schülke& Mayr GmbH	Τεταρτοταγής ένωση, αλδεΐδη
Microzid Sensitive Μαντηλάκια	Schülke& Mayr GmbH	Τεταρτοταγείς ενώσεις
Διάλυμα Microbac Tissues	BODE Chemie GmbH	Τεταρτοταγείς ενώσεις

Γενικά, κατά την επιλογή ενός απολυμαντικού, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερες αλκοόλες. Το ιδανικό είναι τα πρώτα 5 συστατικά να μην περιέχουν αλκοόλες, ή αυτές να προσδιορίζονται με ποσότητες "< 5%".

3.4. Συντήρηση και επισκευή

Η MAVIG GmbH πωλεί τα προϊόντα της μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Αυτοί οι αντιπρόσωποι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εξυπηρέτηση, τη συντήρηση και την επισκευή του προϊόντος. Ως εκ τούτου, επικοινωνήστε πρώτα με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη σας.

Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να επιθεωρεί το WD για ελαττώματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά το αργότερο ανά τρίμηνο, ως εξής:

- Ομαλή, αθόρυβη λειτουργία των περιστρεφόμενων τροχών
- Ασφαλής απελευθέρωση και συγκράτηση των φρένων τροχού
- Ζημιές στα προστατευτικά από την ακτινοβολία καλύμματα (γρατσουνιές, ρωγμές κ.λπ.)

WD257, WD261, WD302 Μόνο WD304

- Ομαλή κίνηση των άνω αναβολέων σε όλο το εύρος μετατόπισης.

Μόνο WD261

- Ασφαλής ασφάλιση του άνω βραχίονα σε όλο το εύρος ρύθμισης.

3.5 Βαθμονόμηση και επαλήθευση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγχετε το προϊόν για εξωτερικές ζημιές πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε ξανά ένα κατεστραμμένο προϊόν!

3.6. Εγγύηση

Κατ' αρχήν, ισχύουν οι "Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις" μας. Αυτά είναι διαθέσιμα στον φορέα εκμετάλλευσης το αργότερο από τη σύναψη της σύμβασης.

Η MAVIG εγγυάται την ασφάλεια και την ορθή λειτουργία του προϊόντος/συστήματος μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- το προϊόν/σύστημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό και λειτουργεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια και εγκεκριμένα ανταλλακτικά, ή αξεσουάρ που ορίζονται από τη MAVIG, ακόμη και από τρίτους. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων ενέχει άγνωστους κινδύνους και πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση.
- δεν γίνονται μη εξουσιοδοτημένες διαρθρωτικές ή άλλες τροποποιήσεις στο προϊόν/σύστημα. Δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή μετατροπές του προϊόντος για λόγους ασφαλείας.
- Οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης εκτελούνται σύμφωνα με τα καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Η εγγύηση του κατασκευαστή για την κατασκευή και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι 24 μήνες.

4 Αποθήκευση, μεταφορά, διάρκεια ζωής

Αποθήκευση μόνο σε κλειστούς ή καλυμμένους χώρους.

Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης:

- Θερμοκρασία: από -20° έως +70°C
- Σχετική υγρασία: 95% το πολύ
- Πίεση αέρα: από 700 έως 1060 hPa

Λειτουργία όλων εκτός από το WD261:

- Θερμοκρασία: από +10° έως +70°C
- Σχετική υγρασία: από 20 % έως 75 % το πολύ.
- Πίεση αέρα: από 700 έως 1060 hPa

Λειτουργία μόνο WD261:

- Θερμοκρασία: από +10° έως +40°C
- Σχετική υγρασία: από 20 % έως 75 % το πολύ.
- Πίεση αέρα: από 700 έως 1060 hPa

5. Τεχνικά δεδομένα

Ενημερωθείτε για τα τεχνικά στοιχεία απόδοσης του προϊόντος στα δελτία δεδομένων και στους καταλόγους προϊόντων μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.mavig.com ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας:

eMail info@mavig.com Τηλέφωνο +49 (0) 89 420 96 - 0

6. Απόσυρση και διάθεση

Η συσκευή πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας εάν έχει υποστεί βλάβη ή δεν έχει περάσει τη δοκιμή συντήρησης.

Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις:

eMail info@mavig.com Τηλέφωνο +49 (0) 89 420 96 - 0



MAVIG GmbH Headquarters

PO Box 82 03 62
81803 Munich
Germany

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

Phone +49 (0) 89 420 96 0
Fax +49 (0) 89 420 96 200
e-Mail info@mavig.com

Nordic & Baltic Countries MAVIG Nordic

Stockholm
Sweden

Phone +46 (0) 722 25 25 68
e-Mail larsson@mavig.com

Benelux, GB, Ireland MAVIG B.V.

Mercuriusweg 86
2516 AW Den Haag
Netherlands

Phone +31 (0) 70 33 11 688
Mobile +31 (0) 61 595 43 48
e-Mail simmonds@mavig.nl

France MAVIG France SARL

66, Ave. des Champs Elysées
F-75008 Paris
France

Phone +33 (0)1 30 59 46 23
Fax +33 (0)1 30 59 46 23
e-Mail info@mavig.fr

Southeast Europe MAVIG Southeast Europe

Ljubljana
Slovenia

Phone +386 (40) 6 33 900
e-Mail dejak@mavig.com

China MAVIG Healthcare Beijing Co., Ltd.

Room #1010, Floor 9
#609 Wang Jing Yuan
Chaoyang District
Beijing 100102, P.R.China

Phone +86 - 10 - 64 78 19 21
Fax +86 - 10 - 64 78 19 21
Mobile +86 - 13 70 122 85 86
e-Mail zhang@mavig.com

REPRESENTATION

USA & Canada

Ti-Ba Enterprises, Inc.

25 Hytec Circle
Rochester, NY 14606
USA

Phone +1 (585) 247 1212
Fax +1 (585) 247 1395
e-Mail mavigusteam@mavig.com

Middle East & Northern Africa Mena Medical Development

Ashrafieh – Adlieh Square – Alfaras St.
- Alboustany Building, 5th floor
Beirut
Lebanon

Phone +961 14 23 499
Fax +961 14 26 499
e-Mail mavig@mena-md.com

Russian Federation

AO Sante Medical Systems

Novodmitrovskaya 2, bld.1
127015 Moscow
Russia

Phone +7 499 551 55 73/75
e-Mail info@sante.ru

www.mavig.com